

Ormco

symetri™  
CLEAR

Resistência Aprimorada | Estética Avançada | Fácil descolamento





## Bracket com estética avançada

Symetri Clear™ é um bracket com estética avançada projetado para fornecer uma resistência aprimorada, conforto ao paciente e descolamento fácil e seguro, sem quebrar



\*Dados de arquivo.

## A experiência do descolamento

O projeto proprietário da base e as pinças patenteadas de Symetri Clear™ permitem uma remoção segura, fácil e não destrutiva do bracket. O bracket se desprende todo de uma vez do dente exercendo uma força mínima.

A superfície da base é estudada de forma que o bracket se desprenda todo inteiro do esmalte com uma força mínima e sem quebrar




A superfície da base estampada a laser é controlada com precisão a fim de garantir estabilidade e confiabilidade durante a colagem e o descolamento

Base anatômica perfilada e compacta, estudada para se adaptar bem em cada dente

## Estudado para pacientes e odontologistas

Symetri Clear™ é um bracket estético estudado para assegurar o máximo conforto ao paciente, cujas características satisfazem ao máximo as exigências clínicas. A superfície lisa e o perfil baixo reduzem a interferência oclusal, permitindo colar facilmente as duas arcadas.

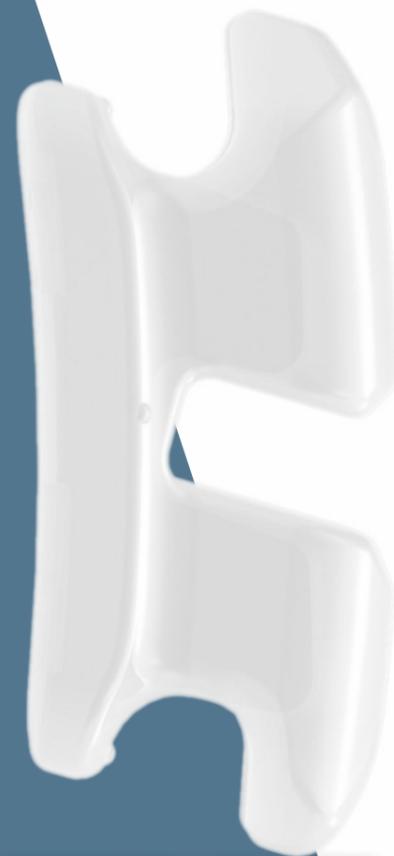


- A forma chanfrada da ranhura facilita a introdução do fio.
- Os contornos da ranhura arredondados reduzem o efeito notching do fio e facilitam o deslizamento.
- A forma e o perfil arredondados das aletas conferem uma superfície mais lisa que significam um excelente conforto para o paciente.
- O perfil mais baixo do bracket reduz ao mínimo o risco de contato com o esmalte dos dentes opostos.
- O perfil baixo garante um excelente resultado estético e reduz a interferência oclusal.



## Dimensões in/out únicas e otimizadas

Uma exclusiva Ormco, Symetri Clear™ está disponível nas dimensões in/out padrão e slim para as laterais superiores. A dimensão proprietária in/out slim de Ormco é estudada para alinhar as bordas incisais dos centrais, dos laterais e dos caninos, e oferece a possibilidade de reduzir as dobras do fio e de melhorar o acabamento.

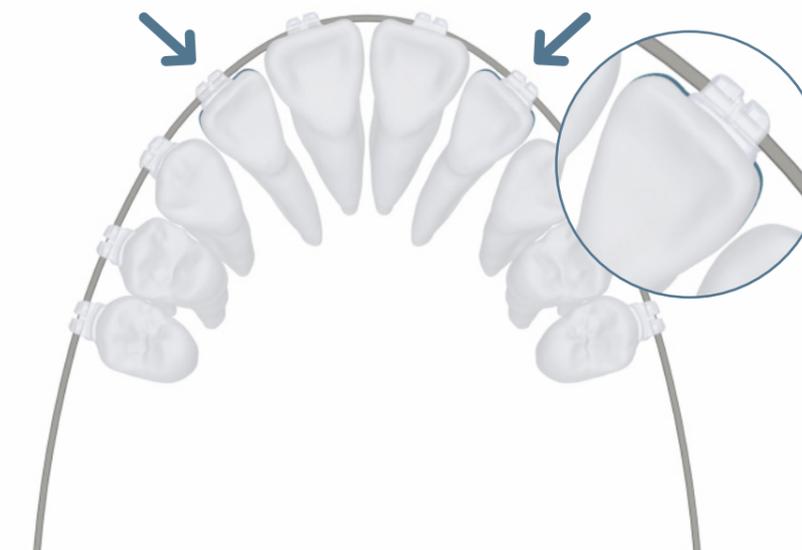



dente	torque	ang	rupt	tipo bracket	número da peça			
<b>MAXILAR</b>					.018 L	.018 R	.022 L	.022 R
Central	+17°	4°	0°	twin	418-1111	418-1110	419-1111	419-1110
Lateral	+10°	8°	0°	twin	418-1211	418-1210	419-1211	419-1210
Lateral - Opcional Slim In/Out	+10°	8°	0°	twin	418-1213	418-1212	419-1213	419-1212
Canino	0°	8°	0°	twin	418-1311	418-1310	419-1311	419-1310
Canino - Gancho	0°	8°	0°	twin	418-2311	418-2310	419-2311	419-2310
Pré-molar	-7°	0°	0°	twin	418-1510		419-1510	
Pré-molar - Gancho	-7°	0°	0°	twin	418-2511	418-2510	419-2511	419-2510
<b>MANDIBULAR</b>					.018 L	.018 R	.022 L	.022 R
Anterior	-6°	0°	0°	twin	418-1010		419-1010	
Canino	0°	3°	2°	twin	418-1411	418-1410	419-1411	419-1410
Canino - Gancho	0°	3°	2°	twin	418-2411	418-2410	419-2411	419-2410
1° Pré-molar	-12°	0°	0°	twin	418-1610		419-1610	
1° Pré-molar - Gancho	-12°	2°	0°	twin	418-2611	418-2610	419-2611	419-2610
2° Pré-molar	-17°	0°	0°	twin	418-1710		419-1710	
2° Pré-molar - Gancho	-17°	2°	0°	twin	418-2711	418-2710	419-2711	419-2710

Kits individuais para paciente		.018	.022
Symetri Clear™ superior/inferior 5-5 com ganchos 3-4-5	twin	746-2101	746-2201
Symetri Clear™ superior/inferior 3-3 com ganchos em 3	twin	746-2102	746-2202
Symetri Clear™ 3-3 superior com ganchos em 3	twin	746-2103	746-2203
Symetri Clear™ 5-5 superior com ganchos em 3	twin	746-2105	746-2205
Symetri Clear™ 5-5 superior com ganchos 3-4-5	twin	746-2106	746-2206

- Instrumento de descolamento Symetri Clear™ 866-4025
- Typodont para Symetri Clear™ 717-0021



Para mais informações entre em contato com o seu representante Ormco no telefone 00 800 3032 3032 ou visite o site [ormcoeurope.com](http://ormcoeurope.com)

symetri™  
CLEAR

Entre em contato com o seu representante Ormco no telefone 00 800 3032 3032  
Para mais informações visite o site [ormcoeurope.com](http://ormcoeurope.com)

Gemelares | Digital | Auxiliares | Desenvolvimento do consultório | Formação  
Auto-ligados| Alinhadores| Tubos/Bandas | Fios | Produtos para laboratório

© 2019 Ormco Corporation

**Ormco**

ORMCO BV  
Basicweg 20, 3821 Amersfoort  
Holanda  
[ormco.pt](http://ormco.pt)

762-6655